



CAS IMPLANTS

BRIDGE IMPLANTO-VISSE

Laboratoire LO MONACO Serge



BRIDGES ET IMPLANTS



UN WAXUP EST DEMANDE AU LABORATOIRE



UNE SOLUTION PROTHETIQUE EST TROUVE

- ***SURELEVATION DE L OCCLUSION***
- ***SUR LA MANDIBULE.***
- ***BRIDGE ANTERIEUR ADORO DE 33 de 43***
- ***BRIDGE CERAMIQUE DE 44 à 46***
- ***BRIDGE CERAMIQUE DE 34 à 36***
- ***SUR LE MAXILLAIRE.***
- ***BRIDGE COMPLET RESINE PROVISOIRE***
- ***COURONNE COULEE sur 17 ET 27***
- ***BRIDGE C.I.C de 13 à 23***
- ***BRIDGE IMPLANTS VISE sur 24/25/26 et 14/15/16***



CONFECTION DU BRIDGE PROVISOIRE



CONCEPTION DU BRIDGE PROVISOIRE



MISE EN BOUCHE DU PROVISOIRE



PREPARATION DES BRIDGES CCM SUR LA MANDIBULE



*APRES PREPARATION
MISE EN PLACE DU BRIDGE ADORO SUR LES
ANTERIEURS INFERIEURE*



*MISE EN PLACE DU BRIDGE COMPLET
PROVISOIRE SUR LE MAXILLAIRE*



*RESULTATS OBTENUE.
AVANT / APRES
FASE PROVISOIRE POUR LA SURELEVATION DE LA
HAUTEUR*



*BRIDGE ADORO SUR BLOC INFERIEUR
ANTERIEUR .
INLAY FACE INCISAL*



***MISE EN PLACE DU BRIDGE C.I.C ANTERIEUR
SUR LE MAXILLAIRE***



Preparation des implants branemarck



MISE EN PLACE DES CAPUCHONS DE PROTECTION



REBASAGE DU BRIDGE SUR LES IMPLANTS





PRISE DE L'EMPREINTE ET PREPARATION DE LA PROTHESE



SCULPTURE DES CHAPPES



CHAPPES COULEE ET MISE EN PLACE Des baguettes de BRAZURE

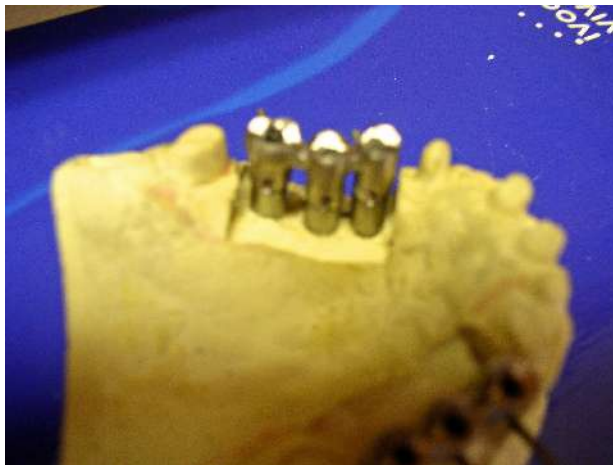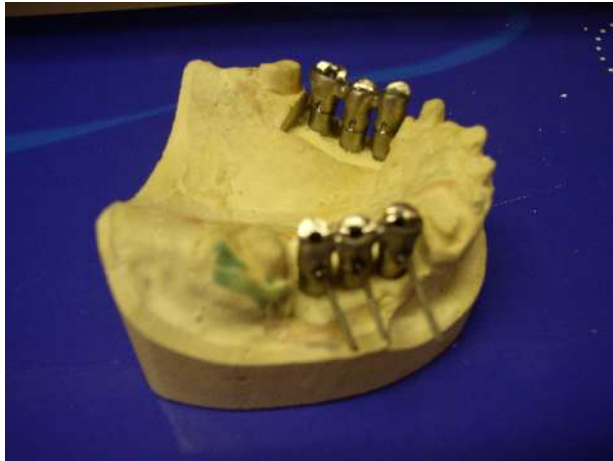

BRAZURES

- *LES CHAPPES SERONT MISENT EN REVETEMENT*
- *COULEE AVEC LE METAL PRECIEUX V DELTALOY*
- *PUIS DEGROSSI*
- *SUR LE BRIDGE DEUX FENTEs SERONT FAITENT UNE EN VESTIBULAIRE UNE EN PALALIN*
- *EN VESTIBULAIRE ELLE SERVIRA POUR FIXER LA CUPULE D' IMPLANT AVEC LA BRAZURE*
- *EN PLALATIN LA SOUDURE SERA DEPOSE ET SERVIRA à SOUDER DEFFINITIVEMENT LA CHAPPE AUX CUPULES D' IMPLANT*
- *ELLES SERONT PRESENTEES SUR LES BASES D' IMPLANT PUIS BRAZEES A L AIDE DE BAGUETTES DE BRAZURE*





Clefs de validation



MONTAGE DE LA CERAMIQUE



FINITION DES CCM SUR IMPLANTS





TRAVAUX PRÊT A ETRE LIVRES

